

VIVAMAX – Otthon az egészségben!



HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

SHIATSU NYAKMASSÍROZÓ KÉSZÜLÉKHEZ



Termékkód: GYVM23

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati kezelési útmutatót!

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. A rendeltetészerű, biztonságos és hatékony használat, a termék élettartamának meghosszabbítása, valamint az Ön biztonsága érdekében kérjük, tanulmányozza át alaposan (és őrizze is meg) a használati és kezelési útmutatót. Ha szükségét érzi, konzultáljon kezelőorvosával.

Tartalom

Általános leírás	2
Termékjellemzők	2
A csomag tartalma.....	2
Biztonsági figyelmeztetés	3
A készülék használata	3
Kapcsolópanel.....	4
Karbantartás	4
Hibalehárítás.....	4
Hulladékkezelés	5
Műszaki adatok.....	5
Webes támogatás és Vivamax termékajánló	5

Általános leírás

A shiatsu japán eredetű **terápiás masszázs** a test bizonyos pontjaira való ujj-nyomás alkalmazásával megelőzi, illetve enyhíti a panaszok széles skáláját, mint például nyak-, váll-, hát-, derékfájás, izomgörcs, stressz, álmatlanság stb. A **hőterápia** oldja a fizikai fáradtság során felmerülő izommerevséget, enyhíti a krónikus mozgásszervi fájdalmat, javítja a vérkeringést.

A shiatsu nyakmasszírozó készülék shiatsu masszázst hőterápiával ötvözve szolgálja az Ön kényelmét, testi-lelki felfrissülését és ellazulását!

Termékjellemzők

- tradicionális ujj-nyomásos masszázs 4 masszázsgörgővel
- a melegítő funkció fokozza a masszázs jótékony hatását
- szivargyújtóról autóban is működtethető (az adapter opcionálisan megvásárolható)

A csomag tartalma

- 1 db Vivamax shiatsu nyakmasszírozó
- 1 db adapter csatlakozó kábel
- 1 db használati kezelési útmutató

Vigyázat!

Kérje ki orvosa véleményét, amennyiben:


- Ön várandós
- szívritmus-szabályzója van
- aggodalmi vannak az egészségi állapotát illetően

Biztonsági figyelmeztetés

- Soha ne hagyja az áram alá helyezett készüléket felügyelet nélkül! Amikor nem használja, mindig áramtalanítsa!
- Nem javasoljuk, hogy folyamatosan 15 percnél hosszabb ideig használja a készüléket.
- Ne használja, duzzadt, gyulladt testrészen, illetve ha bőrsérülései vannak!
- Gyermekek és mozgássérült személyek kizárólag felügyelet mellett használhatják a készüléket!
- Kizárólag rendeltetésszerűen használja a terméket! A rendeltetésszerű használattól való eltérés a garancia elvesztését vonja maga után. Ne használjon a készülékhez olyan alkatrészeket, kiegészítőket, melyek nincsenek a csomagolásban! Ne próbálja önmaga megszerelni!
- Ha a kábel vagy a villásdugó sérülését érzékeli, ha a készülék vizes lesz, vagy vízbe esik, ne helyezze áram alá a készüléket! Forduljon a garancialevélen található szervizhez!
- A készüléket és a kábelt is tartsa távol meleg felületektől (radiátor, tűzhely, kályha)!
- Ne aludjon el a készülék használata közben!
- Ne használja, ha aeroszol gázok vannak a levegőben, vagy kevés az oxigén!
- Használat közben ne takarja le semmivel a készüléket, mert a motor túlmelegedhet, és ez tüzet okozhat!
- Soha ne a kábelénél fogva emelje fel, ne a kábelt használja fogantyúnak!
- Mielőtt áramtalanítja a készüléket, kapcsolja ki a masszáz és melegítő funkciókat.
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték, nem minősül orvostechikai eszköznek.
- Ne használja szabadtéren!
- Gyenge vérkeringésű személyek számára nem ajánlott a készülék használata!
- Ne dobálja, ne ütögesse és óvja az éles tárgyaktól!
- Ha bármilyen egészségügyi panasa van, használat előtt kérje ki orvosa véleményét!
- Nem helyettesíthet használatával orvosi ellenőrzést!
- Nem professzionális eszköz, fáradt izmok nyugtatására, lazítására tervezték.
- Ha hőre érzékeny, használat előtt kérje ki orvosa véleményét!
- Szívritmus-szabályzóval rendelkező személyeknek nem ajánlott a készülék használata, ha mégis használni akarják, kérjék ki orvosuk véleményét.
- Egyszerre csak 15 percig használja, különben a motor túlmelegedhet! Néhány perc pihentetés után újra kezdheti a 15 percet.
- Ne alkalmazza a készüléket orvosi kezelés helyett!
- Lefekvés előtt nem ajánlott a készüléket használni, ugyanis serkentheti a vérkeringést, ezáltal élénkíthet, nehezebbé téve az elalvást.

A készülék használata

1. Óvatosan csomagolja ki a készüléket! Ellenőrizze, hogy a csomag tartalma hiánytalan-e!
2. Helyezze a masszírozót a nyakára, úgy, hogy a két karját tegye be az erre kialakított tartóba (a mellékelt ábra szerint)! Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd a villásdugót az elektromos hálózathoz!
3. A masszázs aktiválásához, nyomja meg a **Masszázs BE/KI kapcsolót** a nyakmasszírozó oldalán található panelen. A gomb másodszori megnyomásával tudja leállítani a készüléket.
4. A masszázsfejek forgásirányának módosításához nyomja meg a **Forgásirányt módosító kapcsolót**! A fűtés bekapcsolásához nyomja meg a **Fűtés BE/KI kapcsolót**. A gomb másodszori megnyomásával kikapcsolhatja a fűtés funkciót. A fűtés bekapcsolását vörös fény jelzi.

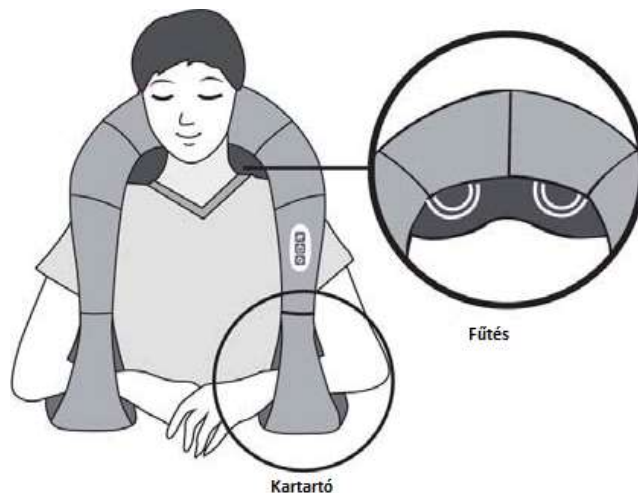

5. Ha már nem használja a nyakmasszírozót kapcsolja ki a **Masszázs KI/BE kapcsoló** gombbal, majd áramtalanítsa!

Kapcsolópanel

- 1. Forgásirányt módosító kapcsoló
- 2. Masszázs Be- /kikapcsoló
- 3. Fűtés Be-/kikapcsoló



Karbantartás

Tárolás és tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, majd áramtalanítsa az adapter kihúzásával!

A/ Tárolás

Amikor nem használja a készüléket, tegye vissza a dobozába, száraz, hűvös helyen tárolja! Tartsa távol éles tárgyaktól, melyek kiszakíthatják a készülék borítását. Ne tekerje a kábelt a készülék köré! Ne lógassa fel a készüléket a hálózati kábelnél fogva!

B/ Tisztítás

Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg, míg a motor kihűl! (Ha a tisztítás előtt használta, akkor a kihűlés eltarthat néhány percig.) Kizárólag tiszta, puha, vagy maximum enyhén nedves ronggyal tisztítsa! Nagyon figyeljen arra, hogy ne érje víz vagy semmilyen más folyadék a készüléket!

Ne merítse folyadékba a tisztításhoz!

Tisztításhoz ne használjon oldószert, benzint, kerozint, festékdoldót, üvegtisztítót és erős szőrű kefét! Ezek mind tönkreteszhetik a készülék felületét.

Ne próbálja önmaga megszerelni, mert ez a garancia elvesztését vonja maga után!

Hibalehárítás

Ha a készülék nem megfelelően működik, az alábbi táblázat segítséget nyújthat a hiba felderítésében. Ha az alábbi táblázat egyik megoldási lehetősége sem vezet eredményre, akkor kérjük, forduljon a szakszervizhez!

Hibajelenség	Lehetséges okok	Megoldás
A készülék nem működik.	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózathoz. A csatlakozó nem megfelelően van csatlakoztatva. A készülék nincs bekapcsolva.	Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Ellenőrizze a csatlakozót. Kapcsolja be a készüléket.
A készülék működés közben hirtelen megáll.	Túl sokáig használta a készüléket ezért a túlmelegedés elleni védelem bekapcsolt.	Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.
Túl erősen vagy túl gyengén masszíroz.	A készülék nem megfelelő szögben áll.	Állítsa a készüléket a megfelelő szögbe.
A készülék furcsa zajokat ad ki működés közben.	Valószínűleg a készülékben egy alkatrész meghibásodott.	Forduljon szakszervizhez.

Hulladékkezelés

A készülék nem dobható a háztartási hulladékok közé!

Kérjük lépjen kapcsolatba az lakóhelyén illetékes hatóságokkal a készülékre vonatkozó környezetvédelmi előírásokkal kapcsolatban (elektromos hulladék)!



A jelzés azt mutatja, hogy a készülék nem kerülhet a háztartási hulladékok közé Európában. Hogy megóvja a környezetre, és az emberi szervezetre történő káros hatástól, melyet az ellenőrizetlen tárolás hulladékkezelés okozhat, hasznosítsa felelősséggel, ezzel segítve az erőforrások hosszú távú újrahasznosítását! A már nem használható terméket kérjük, küldje vissza a vásárlás helyére, ők gondoskodnak az újrahasznosításról!

Műszaki adatok

Terméknév:	Vivamax nyakmasszírozó készülék
Termékkód:	GYVM23
Feszültség:	220-240V
Adapter kimeneti feszültség	12VDC 1,5A
Teljesítmény:	18W
Automatikus kikapcsolás	15 perc után

Webes támogatás és Vivamax termékajánló

A www.vivamax.hu weboldalunkon további hasznos termékinformációkat és leírásokat talál. Oldalunkon megtekintheti térképes üzletkeresőnket, teljes egészségmegőrző választékunkat, valamint letöltheti időszakos akciós kiadványainkat.

Az Ön által vásárolt készülék mellett ajánljuk figyelmébe az alábbi termékeket is, melyeket megtalál weboldalunkon:

- **Vivamax masszázssülések –hátmasszázs az otthonában bármikor**
- **Vivamax lábmasszírozók - a láb átmasszírozásához**
- **Vivamax masszázssővek -a megfelelő alak elérése érdekében**

Lájkolja Facebook oldalunkat, vagy iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből akciós ajánlatainkról, újdonságainkról!

 **VIVAMAX** – Otthon az egészségben!

Magyarországi importőr és forgalmazó:

Vivaldi Kft.

2120 Dunakeszi

Pallag u. 37.

Tel.: 06-1/889-9080

www.vivamax.hu; info@vivaldi.hu

