

VIVAMAX – Otthon az egészségben!



HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

VITALITY KÉZI MASSZÍROZÓ

KÉSZÜLÉKHEZ



Cikkszám: GYVMK3

Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati kezelési útmutatót!

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. A rendeltetészerű, biztonságos és hatékony használat, a termék élettartamának meghosszabbítása, valamint az Ön biztonsága érdekében kérjük, tanulmányozza át alaposan (és őrizze is meg) a használati és kezelési útmutatót.

Tartalom

| | |
|--|---|
| Tartalom | 2 |
| Általános leírás | 2 |
| Termékjellemzők | 2 |
| Biztonsági figyelmeztetések | 3 |
| A készülék részei..... | 4 |
| A kezelőpanel gombjai | 4 |
| Hibaelhárítás | 5 |
| Javítás | 5 |
| Tárolás | 5 |
| Tisztítás..... | 5 |
| Hulladékkezelés..... | 5 |
| A csomag tartalma..... | 5 |
| Műszaki adatok..... | 6 |
| Webes támogatás és Vivamax termékajnló | 6 |

Általános leírás

A Vivamax kézimasszírozó készülék segítségével ellazíthatja görcsös izmait, bármely testrészén! Otthonában élvezheti az ősi, japán eredetű masszázs lazító, nyugtató hatását. A masszírozó készülék ergonomikus formájának köszönhetően valódi, élményt nyújtó masszázs terápiával segíthet revitalizálni a szervezetet. A hosszú, hajlított ergonomikus kar segítségével a test bármely részét könnyedén elérjük a kezelés során. A megfelelő masszázsfejet és programot kiválasztva válik igazi élménnyé és magas hatásfokú terápiás kezeléssé a kézimasszírozó készülék használata. Választható hagyományos, gömbölyű masszázsfej; ujjnyomást imitáló mélyizom masszázsfej, precíziós masszázsfej és frissítő, háromszögű masszázsfej – a kívánt hatás elérése érdekében.

Termékjellemzők

- A hosszú, ergonomikus kar segítségével kényelmesen használható.
- 4 különböző erősségű előre beállítható (automata) programmal rendelkezik, a kívánt terápiás cél elérése érdekében válassza az Ön számára legmegfelelőbbet.
- A megfelelő masszázsfejet kiválasztva válik igazi élménnyé és magas hatásfokú terápiás kezeléssé a kézi masszírozó készülék használata.
- 4 cserélhető masszázsfej: hagyományos gömbölyű masszázsfej, mélyizom masszázsfej, precíziós masszázsfej és háromfejű frissítő, élénkítő masszázsfej.
- Az 4 beállítható intenzitásnak köszönhetően mindenki a saját igénye szerint masszírozhat, a cserélhető masszázsfejek pedig változatos masszázsélményt biztosítanak.

Figyelem!

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót!
- Tartsa távol mindenféle nedvességtől és víztől!
- Fürdőszobában ne használja!
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték.
- A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően használja, ahogyan azt az útmutatóban olvasta.

Biztonsági figyelmeztetések

- Ne szereljen a készülékre rá nem illő tartozékot!
- Gyerekek, mozgássérültek ne használják!
- Tűztől távol tartandó!
- Szem közelében és érzékeny bőrfelületen vagy érzékeny testrészen ne használja!
- Ne szerelje szét és össze! Ha elromlik, forduljon a garancialevélen található szervizhez!
- Használat közben figyeljen a ruhájára, nehogy kiszakadjon!
- Szabadban ne használja!
- Ne használjon a készülékhez semmilyen csavart vagy alkatrészt, amit nem a termékhez csomagoltak! A kézi masszírozó semmilyen nyílásába ne tegyen, oda nem illő alkatrészt!
- Ha a készüléket csatlakoztatta az elektromos bemenethez, soha ne hagyja őrizetlenül!
- Ha bármilyen egészségügyi panasz van, használat előtt kérje ki orvosa véleményét!
- Ne használja a készüléket, ha Ön terhes, a közelmúltban műtéten esett át, súlyos betegsége van (pl. epilepszia, vérzékenység, cukorbetegség okozta diabéteszes neuropátia, rák, magas vérnyomás, hőérzékenység, neuromuszkuláris zavar), ha csak a kezelőorvosa nem javasolja.
- Egy huzamban maximum 15 percig működtesse!
- Ne használja gyulladt, dagadt, sérült bőrfelületen!
- A készülék használata nem helyettesít semmilyen orvosi kezelést. Ha bármilyen fizikai elváltozás miatt nem képes a távirányítót kezelni, ha mozgássérült, ne használja a készüléket!
- Ha gyermek vagy mozgássérült személy használja a készüléket, mindig felügyelje, hogy alkalmazása rendeltetésének megfelelő legyen!
- Használat után mindig kapcsolja ki!
- A konnektorból való kihúzás után ügyeljen arra, hogy az elektromos csatlakozó huzal ne csomózódjon össze, mert az hosszú távon a huzal sérüléséhez vezethet!

A készülék részei

1. Kézi masszírozó ergonomikus kialakítású karral

A hosszú, ergonomikus kar egyszerűbb és kényelmesebb használatot eredményez, az egyes testrészek így könnyen elérhetővé válnak.

2. Választható masszírozó fejek

4 cserélhető masszázsfej: hagyományos, gömbölyű masszázsfej; mélyizom masszázsfej; precíziós masszázsfej és frissítő, élénkítő masszázsfej.

A masszírozó fejek könnyedén cserélhetőek. A készüléken lévő masszázsfjet csupán az óramutató járásával ellentétes irányba kell elforgatni, mindaddig, amíg le nem válik az illesztésről. A kívánt masszírozó fej rögzítéséhez helyezze a fejet az illesztésre, és az óramutató járásának megfelelő irányba forgassa el és szorítsa a készülékre.



A kezelőpanel gombjai

ON/OFF: A bekapcsolásához nyomja meg az „ON / OFF” gombot. Újbóli megnyomással a készülék kikapcsol.

Sebesség állító gomb

A kezelő panelen elhelyezett gombok megnyomásával állíthatja a masszázs sebességét „SPEED+” – gyorsítja a masszázs sebességét; „SPEED-” – lassítja a masszázs sebességét.

Program kiválasztása


A kezelőpanelen elhelyezett „AUTO” gomb megnyomásával választható ki a kívánt masszázs üzemmód: folyamatos masszírozás, ütögető masszírozás, pulzáló masszírozás és vibráló masszírozás módok közül választhat a gomb ismételt megnyomásával.

A készülék üzembe helyezése

- Válassza ki a használni kívánt masszírozó fejet, helyezze a kézi masszírozó illesztésére.
- Kapcsolja be a készüléket a Be/Ki (ON/OFF) kapcsoló gomb benyomásával.
- A programválasztó gombokkal válassza ki a kívánt masszázs üzemmódot.
- A sebességállító gombokkal állítsa be a kívánt masszírozási sebességet.

A készülék masszázs programjai

- 1. Masszázsfunckió folyamatos masszírozással
- 2. Masszázsfunckió ütögető masszírozással
- 3. Masszázsfunckió pulzáló masszírozással
- 4. Masszázsfunckió vibráló masszírozással

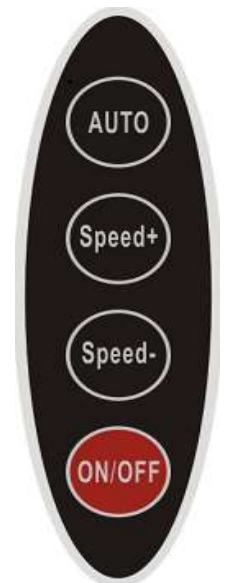

Megjegyzés

Masszírozás közben folyamatosan mozgassa a készüléket, ne időzzön egy területen 3 másodpercnél tovább.

Hibaelhárítás

Ha a készülék nem megfelelően működik, az alábbi táblázat segítséget nyújthat a hiba felderítésében. Ha egyik megoldási lehetőség sem vezet eredményre, akkor kérjük, forduljon a szakszervizhez.

| Hiba | Hiba forrása | Hiba javasolt orvoslása |
|---------------------|---|-------------------------------|
| Nem működik a motor | A csatlakozó kicsúszott az aljzatból | Nyomja be megfelelően a dugót |
| | A BE/KI (ON/OFF) kapcsoló KI (OFF) pozícióban van | Ellenőrizze a kapcsolót |

Javítás

Ne próbálkozzon meg a házilagos javítással! A készülék szétszerelése és nem rendeltetésszerű használata a garancia elvesztését vonja maga után! Nincsenek a készülékben otthon megjavítható alkatrészek. Probléma esetén kérjük, forduljon az eladóhelyhez vagy a forgalmazóhoz!

Tárolás

Legcélszerűbb, ha a készüléket saját dobozában tárolja, ellenkező esetben biztonságos, száraz, hűvös helyet válasszon! Az csatlakozó vezetékét ne tekerje a készülék köré!

Tisztítás

- Áramtalanítsa a készüléket és várja meg, míg a motor kihűl!
- Csakis enyhén nedves, puha kendővel vagy szivaccsal tisztítsa! Ne tegye vízbe a készüléket!
- Ne használjon semmilyen tisztítószert!
- Tisztításhoz mindig kapcsolja ki a készüléket!

Hulladékkezelés

Ezt a készüléket nem szabad kidobni a háztartási szemétbe!

Minden egyes fogyasztó köteles minden elektromos vagy elektronikus készüléket leadni lakóhelyének gyűjtőhelyén vagy a kereskedőnél- függetlenül attól, hogy tartalmaz-e káros anyagot vagy nem-, hogy továbbítani lehessen környezetkímélő ártalmatlanításra!

Ártalmatlanítás tekintetében forduljon az illetékes helyi hatóságokhoz vagy a kereskedőkhöz!



A csomag tartalma

- 1 db masszírozó készülék
- 4 db cserélhető masszázsfej
- 1 db használati utasítás

Műszaki adatok

| | |
|--------------------|--------------------|
| Cikkszám | GYVMK3 |
| Feszültség | 220-240V, 50-60 Hz |
| Teljesítmény | 25 W |
| Minősítési osztály | I.osztály |
| Származási hely | Kína |

Webes támogatás és Vivamax termékajánló

A www.vivamax.hu weboldalunkon további hasznos termékinformációkat és leírásokat talál. Oldalunkon megtekintheti térképes üzletkeresőnket, teljes egészségmegőrző választékunkat, valamint letöltheti időszakos akciós kiadványainkat.

Az Ön által vásárolt készülék mellett ajánljuk figyelmébe az alábbi termékeket is, melyeket megtalál weboldalunkon:

- Vivamax Salty-Air ultrahangos párástító (Salvus vízzel és illóolajokkal is használható)
- Vivamax és Winix légtisztítók
- Vivamax illóolajok
- Vivamax akupresszúrás matrac és párna
- Vivamax masszázseszközök

Lájkolja Facebook oldalunkat, vagy iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön első kézből akciós ajánlatainkról, újdonságainkról!

 **VIVAMAX** – Otthon az egészségben!



Magyarországi importőr és forgalmazó:

Vivaldi Kft.

2120 Dunakeszi, Pallag u. 37.

Tel.: 06-1/889-9080,

info@vivaldi.hu

www.vivamax.hu;